



MANUAL SJÄLVTEST TIK'ALERT® Självtest

SV

quicktest.se

Avläs resultat

Styrka, färg eller intensitet i testfönstret har ingen inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat. **T** och **C** är förkortningar för **T** (Test) och **C** (Control).

1. Negativt resultat

Endast en färgad linje framträder under C (Control). Detta betyder att inga antikroppar mot Borrelia bacterium är detekterade i blodet.



2. Positivt resultat

Två färgade linjer framträder i testfönstret under T och C. Notera att intensiteten under T kan vara tydligare eller svagare än under C. Detta betyder att antikroppar mot Borrelia bacterium är detekterat i blodet. Du bör kontakta läkare.



3. Misslyckat resultat

Om ingen linje framträder eller om det endast framträder en linje under T så är testet misslyckat och bör kastas. Notera att självtestet då är förbrukat och kan inte återanvändas. Det rekommenderas att ett nytt test utförs.



Frågor och svar

Hur fungerar testet?

Om ett fästingbett har gett borrelia så finns det IgM antikroppar i blodet. Borrelia TIK ALERT detekterar denna antikropp.

När ska testet utföras?

Det är rekommenderat att utföra testet 2-4 veckor efter ett misstänkt fästingbett eller när ett rött märke framträder där brett skett. Notera att endast 1-2% av fästingbett ger borrelia. Ett positivt resultat indikerar på en infektion och en läkare ska då kontaktas.

Kan resultatet visa fel?

Resultatet är korrekt om testet har utförts enligt instruktion. Testet kan dock visa fel om testkassetten varit utsatt för fukt eller om mängden blod inte är tillräcklig. Den medföljande pipetten säkerställer att rätt mängd blod används.

Har linjernas intensitet i testfönstret någon betydelse?

Styrka, färg eller intensitet i kontrollstrecket har ingen inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat. Om du kan urskilja en linje ska detta tolkas som en linje.

Vad betyder linjen under markeringen C (Control)?

Det betyder att självtestet fungerar normalt.

Kommer testet att vara tillförlitligt om jag avläser testet efter 15 minuter?

Nej. Testet ska avläsas inom 10 minuter efter utspädningsvätskan har droppats i testhålet. Efter 15 minuter är testet inte tillförlitligt och bör kastas.



Varningsföreskrifter och viktig information

Detta är ett in-vitro självtest, endast för extern bruk. Får ej förtäras. Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga instruktioner gällande handhavande, blodmängd och utspädning. Förvaras mellan +4°C till +30°C. Förvaras torrt och skyddas mot solljus. Ska ej användas efter båst före datumet som anges på aluminiumförpackningen. Testet ska inte användas om aluminiumförpackningen är öppnad. Självtesten ska inte återanvändas. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och djur. Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som restavfall.

- Pressa HÄRT på fingret för att få ut en dropp blod.
- Pipetten placeras mot blodsdroppen, ett undertryck gör att blodet sugs upp. Låt endast den mängd blod som krävs flöda till markeringen (streck) av pipetten. Om mer blod behövs, massera fingret igen. Försök undvika att få in luftbubblor i pipetten. Notera att detta moment kan ta upp till 2 minuter att genomföra.
- Pressa ut blodet från pipetten i testhålet (det runda hålet) genom att trycka på pipetten.
- Om du inte lyckas med att låta blodet flöda i pipetten - gör så här: Lägg bort pipetten, fortsätt att massera fingret hårt tills en dropp har formats - om möjligt; låt droppen falla fritt ner i testhålet. Om droppen inte vill lämna fingret; Låt droppen vidrör testhålet och flytta ut.
- Vänta ca 30 sekunder för att låta blodet absorberas i testhålet. Skruva av det blå locket på utspädningsvätskan. Droppa sedan 4 droppar i testhålet med 2 sekunder mellan varje dropp.
- Läs av resultatet efter 10 minuter. Tolka inte resultatet efter 15 minuter.

Vill du se hur det går till?

Scanna QR-koden med din mobiltelefon

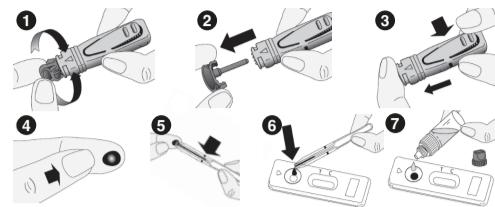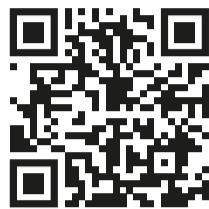

GÖR SÅ HÄR:

- Tvätta händerna med tvål och vatten. Skölj och torka händerna noga.
- Förbered för att genomföra testet: Ta ut testkassetten och pipetten ur aluminiumpåsen och placera testkassetten plant inom räckhåll. (Torkmedel används ej).
- Förbered lansetten. Denna görs genom att vrinda om den grå delen. (bild 1) på lansetten 2-3 varv till den lossnar HELT och sedan dra den grå delen rakt ut (bild 2), utan att trycka på avtryckaren.
- Massera den valda fingertoppen med dina rengjorda fingrar.
- Tryck lansetten BESTÄMT mot fingret och tryck på avtryckaren. (Nålen kommer automatiskt att dras in i lansetten).

Frågor och svar

Vad ska jag göra om testet är positivt?

Om resultatet är positivt betyder det att antikroppar mot Borrelia bacterium är detekterade, du bör omgående kontakta en läkare som kommer göra en vidare utredning och behandling.

Vad ska jag göra om resultatet är negativt?

Om resultatet är negativt betyder det att inga antikroppar mot Borrelia bacterium är detekterade. Om fästingbettet har skett inom 2 veckor har antikroppar troligtvis inte ännu producerats. Det rekommenderas då att ett nytt test utförs ca 2-4 veckor efter fästingbettet skedde. Om klåda och/eller feber uppstår är det rekommenderat att kontakta läkare. Misstänker du sjukdom eller symptom ska du alltid kontakta sjukvård, oavsett resultat på testet.

Hur säkert är testet?

Studier visar på 93% tillförlitlighet.

Lansett: STERILE R	CE
Owen Mumford Ltd	1639
Brooks Hill, Woodstock, Oxfordshire OX020 1TU (UK)	
EC REP GERMANY	
Owen Mumford GmbH, Alte Häge 1, 63762, Großostheim, Germany	
VEDA LAB	
Rue de l'Expansion - ZAT du Londeu - Cérisé	CE
BP 181 - 61006 ALENCON Cendex (France)	0483
Läs instruktionerna före användning	IVD För in vitro diagnostiskt bruk
Förvara mellan +4°C och +30°C	LOT Batchnummer
Tillverkare	Ateranvänd inte Utgångsdatum
	MD- 080020 m5 c - Reviderad 2022/01

Du visste väl att vi också erbjuder självtester inom...



NYHET! Multitest X6

Nu kan du testa kolesterol, laktat (mjölkysyr), ketonivåer (ketos), triglycerider och blodsocker – allt i ett instrument! Varje test har sin egen unika teststicka, så att du alltid får exakta resultat.



CRP-Test

Vårt unika och patenterade CRP-test ger dig svar på några minuter. Testet gör du som alla andra av våra tester; hemma - svaret får du direkt.



Levertest

Levern är ett av kroppens viktigaste organ. Om inte levern mår bra så kan många funktioner slås ut. Ofta kommer leverproblem smygande och många missar de första symptomen med att något är fel. Ett levertest kan ge klarhet i hur din lever mår.

6. Purista KOVAA sormenpäästä saadaksesi esin pisaran verta.
7. Aseta pipetti veripisaralle ja ime verta pipetin merkki asti. Jos verta ei tule heti tarpeeksi, hiero sormenpäästä udelleen. Älä päästä ilmakuplia pipettiin. Tarvittava verimääri saamisen pipetti voi kestää jopa kaksi minuuttua.
8. Purista veri pipetistä näyteaukkoon (pyöreä reikä) painamalla pipetin päästä.
9. Jos et onnistu saamaan verta pipetin - toimi seuraavasti: Laita pipetti pois, jatka sormen hieromista voimakkasti, kunnes muodostuu verenpisara - jos mahdotlista; anna pisara pudota vapautti te-stireikään. Jos pisara ei halua lähtää sormesta; Anna pisaran koskettaa testireikää ja valua ulos.
10. Odota 30 sekuntia, jotta verta imeytyy näyteaukkoon. Avaa laimennusneste (sininen kierrekorkki). Tiputa näyteaukkoon 4 pisara laimennusnestettä yksi kerrallaan 3 sekunnin välein.
11. Lee tulos 10 minuutin kuluttua. Älä tulkitse tulosta 15 minuutin jälkeen.


Haluatko nähdä, miten se toimii?

Skanna QR-koodi älypuhelimella



Varoitukset ja tärkeää tietoa

Tämä on in vitro -menetelmällä tehtävä kotitesti, vain ulkoiseen käytölle. Ei saa siellä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käytöltä. Tulos vain ohjeiden mukaisella käytöllä. Noudata soveltuvaltaa ohjeita käsittelystä, veren tilavuudesta ja laimennuksesta. Säilytys +4°C +30°C. Säilytettävä kuivassa paikassa suojuessa auringonvalolta. Ei saa käyttää parasta ennen -päiväyksen jälkeen (merkattu myyntipakkauseen ja suojuuspussia). Älä käytä testiä, jos suojuuspussi on avattu. Ei saa käyttää uudelleen. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Myyntipakkauksia lajittelataan kartonkina, muut osat sekä jätteet.

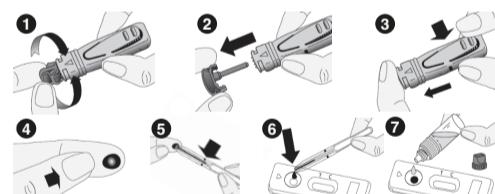

TEE NÄIN:

1. Pese käsiesi huolellisesti saippualla ja vedellä. Kuivaa kädet.
2. Valmistele testi: Poista testikasetti ja pipetti suojuuspussista ja aseta testikasetti kädén ulottuville. (Pussissa olevalla kuivausainetta ei tule käyttää.)
3. Valmistele lansetti. Tämä tehdään käänämällä lansetin harmaata osaa (kuva 1) 2-3 kierrosta, kunnes se irtoo TÄYSIN, ja vetämällä sitten harmaata osaa suoraan ulos (kuva 2) painamatta laukaisinta.
5. Paina lansetti KUNNOLLA sormenpähän ja paina laukaisinta. (Neula tulee vetäytymään automaattisesti takaisin lansettiin.)

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten testi toimii?

Positiivinen testitulos tarkoittaa, että veressä on borrelioosiin vasta-aineita. Ota yhteyttä lääkärin, joka päättää jatkotutkimuksista ja hoidosta.


Mitä teen, jos testin tulos on negativinen?

Negativinen testitulos tarkoittaa, että verestä ei löytynyt borreliabakteerin vasta-aineita. Jos punkinpuruma on alle 2 viikkoa vanha, todennäköisesti vasta-aineita ei ole ehittynyt vielä muodostua. Suosittelemme, että teet uuden testin 2-6 viikkoa purumaan jälkeen. Jos simile nousee kuumentta tai kutinaa, suosittelemme ottamaan yhteyttä lääkärin.

Kuinka turvallinen testi on?

Tutkimukset osoittavat 93 prosentin luotettavuuden.

Lansett: STERILE R	CE
Owen Mumford Ltd	1639
Brooks Hill, Woodstock, Oxfordshire OX020 1TU (UK)	
EC REP GERMANY	
Owen Mumford GmbH, Alte Häge 1, 63762, Großostheim, Germany	
VEDA LAB	
Rue de l'Expansion - ZAT du Londeu - Cérisé	CE
BP 181 - 61006 ALENCON Cendex (France)	0483
Lue ohjeet ennen käytöä	IVD In vitro -diagnositiseen käytööseen
Säilytys +4°C -> +30°C	LOT Eränumero
Valmistaja	Uudeleentulostus

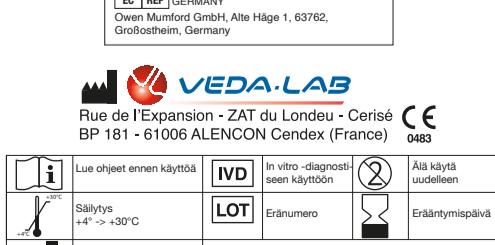

Tiesitkö, että tarjoamme myös seuraavia kotitestejä...?



UUTISET! Multitest X6

Nyt voit testata kolesterolia, laktattia (maito-happoa), ketonitasoja (ketos), triglyceridejä ja verenosokeria - kaikki yhdessä instrumentissa! Jokaisella testillä on oma aina erilainen testiliuska, joten saat aina tarkat tulokset.



CRP-Testi

Ainutlaatuinen ja patenttoitu CRP-testimme antaa vastaukset muutamassa minuutissa. Suoritetaan testit kuten kaikki muutkin testimme; kotona - saat vastauksen heti.



Maksatesti

Maksas on yksilö kehon tärkeimmistä elimistä. Jos maksas ei voi hyvin, monet toiminnot voivat tormätyä. Usein maksaoigelmat hiihdyttävät sisään oireita siitä, että joitain on vialla. Maksatesti voi selventää, kuinka maksasi voi.



MANUAL SELVTEST TIK'ALERT® Selvtest

NO

quicktest.no

NO

Les av resultatet

Styrke, farge eller intensitet i testvinduet har ingen effekt eller betydning for å kunne avlese testresultater.
T og C er forkortelser for T (Test) og C (Control).

1. Negativt resultat

Bare en farget linje vises under C-merket (Control). Dette resultatet betyr at ingen anti-t-TG IgA-antistoffer har blitt påvist i blodprøven.



2. Positivt resultat

To farge linjer vises i vinduet under merkene T (Test) og C (Control). Fargeintensiteten til T-linjen kan være tydligere enn intensiteten til C-linjen. Dette resultatet betyr at blodprøven inneholder anti-t-TG IgA-antistoffer, og at du bør kontaktes en lege.



3. Misslykkat resultat

Dersom ingen linje vises, eller hvis bare en linje under T vises, har testen feilet og bør kasseres. Merk at selvtesten er forbruket og ikke kan gjenbrukes. Det anbefales at en ny test utføres.



quicktest..

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har gitt borrelia, finnes det IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistoffet.

Når skal testen utføres?

Det anbefales å utføre testen 2-4 uker etter et mistenklig flåttbit eller når det vises et rødt merke der bittet oppstod. Merk at bare 1-2% av flåttbit gir Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infeksjon og en lege skal da kontaktes.

Kan resultatet vise feil?

Resultatet er korrekt dersom testen er utført i henhold til instruksjonene. Testen kan vise feil hvis testkassetten har blitt utsatt for fugtighet eller om mengden blod ikke er tilstrekkelig. Den medfølgende pipetten sikrer at riktig mengde blod blir brukt.

Har linjenes intensitet i testvinduet noen betydning?

Styrke, farge eller intensitet av kontrollstreken har ingen effekt eller betydning for å lese testresultatene. Hvis du kan skjelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

Hva betyr linjen under markeringen C (Control)?

Dette betyr at selvtesten fungerer normalt.

Vil testen være pålitelig hvis jeg leser av testen etter 15 minutter?

Nei. Testen skal avleses innen 10 minutter etter at fortynningsmidlet har blitt dryppet i testhullet. Etter 15 minutter er testen ikke pålitelig og bør kastes.

quicktest..

TIK'ALERT® Selvtest

Ref. 70084BI

Selvtest som indikerer borrelia-infeksjon i blodet.

GENERELT

Flåter er insekter, som lever i lav vegetation i middelvarme klimaer. Insekterne kan bære borrelia, og kan derfor infisere mennesker (1-2% smittsomme) ved at både de steder på kroppen, som ikke er dækket af tøj. Borrelia påvirker nervesystemet og kan føre til alvorlige neurologiske sygdomme. Infektionen kan også føre til andre tilstande som kutane lisioner og leddegejt. Etter 3-10 dage, nogle gange op til flere uger efter et bid, opstår det betændelse i bid-området, sædvanligvis er området rødt. Nogen gange opstår der feber under udbruddet. Hvis en infektion er tilfældet, reagerer immunsystemet ved at frigøre antistoffer for at tilintetgøre Borrelia bacterium. Et specifikt antistof (IgM immunoglobulin M) kan identificeres 2 til 4 uger efter et flåtbid. Normalt behandles borrelia-infektion med antibiotika.

Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug.

1. Testhul
2. Provesvar
3. Pipette
4. Grå hætte
5. Utlosr
6. Blå hætte
7. Hvid hætte
8. Fortydningsmiddel

Indeholder:

- 1 stk aluminiumspose, som indeholder:
- 1 stk testkasse
- 1 stk pipette for blodopsamling
- 1 stk Tørningsmiddel (anvendes ikke)

Åbn pakken, når du er klar til at udøre testen.

- 1 steril lancet (+ en ekstra)
- 1 1ml flaske med fortyndning
- 1 manual

MANUAL SELVTEST TIK'ALERT® Selvtest

DK

quicktest.dk

DK

Aflæs resultatet

Styrke, farve eller intensitet i testvinduet har ingen påvirkning eller betydning for aflæsning af testresultatet. T og C er forkortelser for T (Test) og C (Kontrol).

1. Negativt resultat

Kun en enkelt farvet linje vises under C (Control). Dette betyder, at der ikke er blevet fundet antistoffer mod Borrelia bakterien i blodet.



2. Positivt resultat

To farvede linjer vises i testvinduet under T og C. Bemærk, at intensiteten under T kan være tydeligere eller svagere end under C. Det betyder, at der er fundet antistoffer mod Borrelia bakterien i blodet. Du bør kontakte lægen snarest.



3. Mislykket resultat

Hvis der ikke fremkommer en linje, eller hvis der kun vises en enkelt linje under T, er testen forfejet og bør kasseres. Bemærk, at selvtesten er opbrugt og ikke kan gjenbruges. Det anbefales, at der udføres en ny test.



Spørsmål og svar

Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har forårsaget borrelia, findes der IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistof.

Hvornår skal testen bruges?

Det anbefales at udføre testen 2-4 uger efter et mistænkeligt flåtbid, eller når der kommer et rødt merke der, hvor bittet opstod. Bemærk, at kun 1-2 % af flåttbit giver Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infektion, og en læge bør derefter kontaktes.

Kan resultatet være forkert?

Resultatet er korrekt, hvis testen er udført i henhold til instruktionerne. Testresultatet kan være forkert, hvis testkassetten er blevet utsat for fugt, eller hvis blodmængden ikke er tilstrekkelig. Den medfølgende pipette sikrer, at den rette mængde blod bliver brugt.

Har linjenes intensitet i testvinduet nogen betydning?

Kontrollstregens styrke, farve eller intensitet har ingen effekt eller betydning for aflæsning af testresultatene. Hvis du kan skjelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

Hvad betyder linjen under markeringen C (Control)?

Den betyder, at selvtesten fungerer normalt.

Er testen anvendelig, hvis jeg aflæser testen efter 15 minutter?

Nej. Testen bør aflæses indenfor 10 minutter efter, at fortyndningsmidlet er blevet dryppet ned i testhullet. Etter 15 minutter er testen ikke anvendelig og bør kasseres.

quicktest..

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har gitt borrelia, finnes det IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistoffet.

Når skal testen utføres?

Det anbefales å utføre testen 2-4 uker etter et mistenklig flåttbit eller når det vises et rødt merke der bittet oppstod. Merk at bare 1-2% av flåttbit gir Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infeksjon og en lege skal da kontaktes.

Kan resultatet vise feil?

Resultatet er korrekt dersom testen er utført i henhold til instruksjonene. Testen kan vise feil hvis testkassetten har blitt utsatt for fugtighet eller om mengden blod ikke er tilstrekkelig. Den medfølgende pipetten sikrer at riktig mengde blod blir brukt.

Har linjenes intensitet i testvinduet noen betydning?

Styrke, farge eller intensitet av kontrollstreken har ingen effekt eller betydning for å lese testresultatene. Hvis du kan skjelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

Hva betyr linjen under markeringen C (Control)?

Dette betyr at selvtesten fungerer normalt.

Vil testen være pålitelig hvis jeg leser av testen etter 15 minutter?

Nei. Testen skal avleses innen 10 minutter etter at fortyndningsmidlet har blitt dryppet i testhullet. Etter 15 minutter er testen ikke pålitelig og bør kastes.

quicktest..

TIK'ALERT® Selvtest

Ref. 70084BI

Selvtest som indikerer borrelia-infeksjon i blodet.

GENERELT

Flåter er insekter, som lever i lav vegetation i middelvarme klimaer. Insekterne kan bære borrelia, og kan derfor infisere mennesker (1-2% smittsomme) ved at både de steder på kroppen, som ikke er dækket af tøj. Borrelia påvirker nervesystemet og kan føre til alvorlige neurologiske sygdomme. Infektionen kan også føre til andre tilstande som kutane lisioner og leddegejt. Etter 3-10 dage, nogle gange op til flere uger efter et bid, opstår det betændelse i bid-området, sædvanligvis er området rødt. Nogen gange opstår der feber under udbruddet. Hvis en infektion er tilfældet, reagerer immunsystemet ved at frigøre antistoffer for at tilintetgøre Borrelia bacterium. Et specifikt antistof (IgM immunoglobulin M) kan identificeres 2 til 4 uger efter et flåtbid. Normalt behandles borrelia-infektion med antibiotika.

Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug.

1. Testhul
2. Provesvar
3. Pipette
4. Grå hætte
5. Utlosr
6. Blå hætte
7. Hvid hætte
8. Fortydningsmiddel

Indeholder:

- 1 stk aluminiumspose, som indeholder:
- 1 stk testkasse
- 1 stk pipette for blodopsamling
- 1 stk Tørningsmiddel (anvendes ikke)

Åbn pakken, når du er klar til at udøre testen.

- 1 steril lancet (+ en ekstra)
- 1 1ml flaske med fortyndning
- 1 manual

quicktest..

TIK'ALERT® Selvtest

Ref. 70084BI

Selvtest som indikerer borrelia-infeksjon i blodet.

GENERELT

Flåter er insekter, som lever i lav vegetation i middelvarme klimaer. Insekterne kan bære borrelia, og kan derfor infisere mennesker (1-2% smittsomme) ved at både de steder på kroppen, som ikke er dækket af tøj. Borrelia påvirker nervesystemet og kan føre til alvorlige neurologiske sygdomme. Infektionen kan også føre til andre tilstande som kutane lisioner og leddegejt. Etter 3-10 dage, nogle gange op til flere uger efter et bid, opstår det betændelse i bid-området, sædvanligvis er området rødt. Nogen gange opstår der feber under udbruddet. Hvis en infektion er tilfældet, reagerer immunsystemet ved at frigøre antistoffer for at tilintetgøre Borrelia bacterium. Et specifikt antistof (IgM immunoglobulin M) kan identificeres 2 til 4 uger efter et flåtbid. Normalt behandles borrelia-infektion med antibiotika.

Bemærk - Læs instruktionerne nøje før brug.

1. Testhul
2. Provesvar
3. Pipette
4. Grå hætte
5. Utlosr
6. Blå hætte
7. Hvid hætte
8. Fortydningsmiddel

Indeholder:

- 1 stk aluminiumspose, som indeholder:
- 1 stk testkasse
- 1 stk pipette for blodopsamling
- 1 stk Tørningsmiddel (anvendes ikke)

Åbn pakken, når du er klar til at udøre testen.

- 1 steril lancet (+ en ekstra)
- 1 1ml flaske med fortyndning
- 1 manual

quicktest..

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer testen?

Hvis et flåttbit har forårsaget borrelia, findes der IgM-antistoffer i blodet. Borrelia TIK ALERT oppdager dette antistof.

Når skal testen utføres?

Det anbefales å utføre testen 2-4 uker etter et mistenklig flåttbit eller når det vises et rødt merke der bittet oppstod. Merk at bare 1-2% av flåttbit gir Borrelia. Et positivt resultat indikerer en infeksjon og en lege skal da kontaktes.

Kan resultatet være forkert?

Resultatet er korrekt, hvis testen er udført i henhold til instruktionerne. Testresultatet kan være forkert, hvis testkassetten er blevet utsat for fugt, eller hvis blodmængden ikke er tilstrekkelig. Den medfølgende pipette sikrer, at den rette mængde blod bliver brugt.